

Hoe gebruikt u de pelottes?

- In de meeste gevallen zult u met **Vagiwell** starten op advies van een arts of seksuoloog. Probeer u de aanwijzingen die uw behandelaar heeft gegeven zo nauwkeurig mogelijk op te volgen.
- Over het algemeen worden de pelottes om de dag gebruikt.
- Gebruik de pelotte op een ontspannen plek in huis, waar u niet gestoord kan worden. U kunt de pelotte ook in bad of onder de douche gebruiken.
- Voor de oefeningen kunt u de bijsluiters in de verpakking raadplegen of op de website: www.vagiwell.nl of www.vagiwell.be kijken.
- Breng altijd voldoende glijmiddel aan op de pelotte en rond de ingang van de vagina om het inbrengen te vergemakkelijken.

Probeer de aanwijzingen die uw behandelaar heeft gegeven zo nauwkeurig mogelijk op te volgen.

De verschillende Vagiwell-sets

Vagiwell® is een goedgekeurd Medisch Hulpmiddel dat wordt gebruikt bij vaginale klachten en problemen bij het vrijen. Een vagiwell-set bestaat uit 3 of 5 verschillende pelottes.

1. Vagiwell Pelotte-set Small *

3 kleine pelottes van siliconenrubber maat 1-3

Artikelnummer: Vagiwell S
EAN: 4013273001564



2. Vagiwell Pelotte-set Large **

3 grote pelottes van siliconenrubber maat 3-5

Artikelnummer: Vagiwell L
EAN: 4013273001571



3. Vagiwell Pelotte-set Premium ***

5 pelottes van siliconenrubber maat 1-5

Artikelnummer: Vagiwell P
EAN: 4013273001557



Hoe bestel ik Vagiwell?

Bestel een pelotte-set snel en discreet op:
www.memidis-shop.nl



Medisch Hulpmiddel CE
Materiaal Vagiwell pelottes: siliconenrubber

Geproduceerd in Duitsland

Bij een set pelotten (3 of 5 stuks) ontvangt u ook een **glijmiddel, opbergetui** en een **duidelijke gebruiksaanwijzing**.




Memidis Pharma Benelux
Kerkenbos 1077-R, 6546 BB Nijmegen
tel. +31 (0)24 64 55 411
info@memidis.nl

www.vagiwell.nl
www.vagiwell.be

Vagiwell®

Helpt bij vaginale klachten, zoals vaginisme en pijn bij het vrijen.

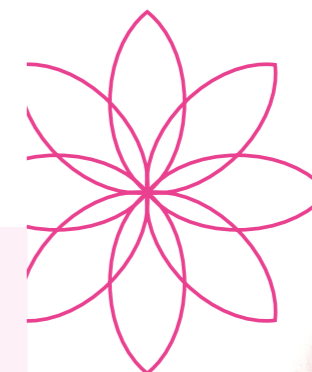

Vagiwell®
Vaginale pelottes



Vagiwell®

De Vagiwell pelotte-set wordt gebruikt om op verantwoorde wijze te oefenen bij **vaginale klachten** zoals vaginisme of pijn bij het vrijen.

Bij welke klachten zijn de Vagiwell pelottes een goede oplossing voor u?

Vaginisme (vaginale klachten en problemen bij penetratie)	✓
Dyspareunie (pijn bij het vrijen)	✓
Vulvodynie (pijn aan de vulva)	✓
Lichen Scelerosus	✓
Na vaginale chirurgie	✓
Pijn bij gynaecologisch onderzoek met een speculum	✓
Pijn bij het inbrengen van een tampon	✓
Na een (transgender) operatie	✓
Vaginale stenose (vernauwing) als gevolg van bijvoorbeeld radiotherapie (bestraling)	✓
Vaginale agenesie (ontbreken van een vagina)	✓

Wat doen de pelottes?

In het Engels worden pelotten ongelukkigerwijs dilatators genoemd. Oefeningen met de pelottes beogen juist niet om de vagina op te rekken.

Met de pelotte-set leert u, door middel van de oefeningen, op een rustige wijze aan een langzaam oplopende diameter in de vagina te wennen. Elke pelotte heeft een taps toelopende vorm en de 5 pelottes hebben oplopende maten.

Let op: Vagiwell pelottes mogen enkel gebruikt worden met een glijmiddel op waterbasis. In de webshop van Memidis vindt u een geschikt glijmiddel: Animé. (www.memidis-shop.nl)

Maat	Kleur	Diameter A / B	Lengte C
1	Lichtblauw	12 / 14 mm	122 mm
2	Mintgroen	16 / 18 mm	135 mm
3	Paars	20 / 22 mm	150 mm
4	Roze	24 / 26 mm	163 mm
5	Beige	28 / 30 mm	177 mm



Waarom Vagiwell pelottes?

Vagiwell is een goedgekeurd Medisch Hulpmiddel dat kan worden gebruikt bij vaginale klachten en problemen bij het vrijen.

Vagiwell pelottes zijn gemaakt van zachte medische siliconen en hebben een juiste balans tussen flexibiliteit en stevigheid. Ze zijn er in verschillende maten om stap-voor-stap, op een comfortabele manier te oefenen.

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat vrouwen de voorkeur geven aan **niet-doorzichtige, flexibele, zachte en gekleurde pelottes**. Vagiwell heeft deze eigenschappen!

Betere informatie helpt u naar meer begrip en een juiste behandeling.



Vagiwell®
Vaginale pelottes

