

Vagiwell[®] Pelotten

Vaginale pelotten voor klinisch- of thuisgebruik

Grootte	Kleur	Doorsnede	Lengte
Gr. 1	Felblauw	12/14 mm	122 mm
Gr. 2	Mint	16/18 mm	135 mm
Gr. 3	Violet	20/22 mm	150 mm
Gr. 4	Rose	24/26 mm	163 mm
Gr. 5	Beige	28/30 mm	177 mm



Afbeelding op ware grootte

CE Medisch Hulpmiddel



**Memidis
Pharma**
Women's Health

Indicaties

Bij vaginale klachten, pijn en problemen bij penetratie als gevolg van:


- ▶ Dyspareunie
- ▶ Vaginisme
- ▶ Littekenweefsel na episiotomie of gedeeltelijke of totaalruptuur
- ▶ Na vaginale chirurgie
- ▶ Gedurende en na radiotherapie/chemotherapie (vulva-, vaginacarcinoom)
- ▶ Vaginale stenose
- ▶ Huidziekten zoals bepaalde vormen van Lichen, bijvoorbeeld Lichen Sclerosus
- ▶ Vaginoplastiek/Neovagina
- ▶ Vaginale vernauwing die door de betrokkene als seksueel storend wordt ervaren

Gewenningsoefeningen met de Vagiwell pelotten zijn ook zinvol bij gynaecologische onderzoeken of als het inbrengen van tampons als erg pijnlijk wordt ervaren.

Toepassing

- 1 De Vagiwell pelotte langzaam in de vagina invoeren (beginnend met de kleinste grootte).
- 2 De Vagiwell pelotte enige minuten in de schede-ingang laten en aansluitend in- en uitvoeren, zonder deze volledig uit de schede te nemen.
- 3 Deze oefening 5x herhalen en daarna in een lichte draaibeweging overgaan.
- 4 De pelotte daarna 5x voorzichtig naar rechts en 5x naar links bewegen. Door deze bewegingen kan het vaginale weefsel langzaam wennen aan de verwijding.

Leverbare sets, bestel via www.vagiwell.nl

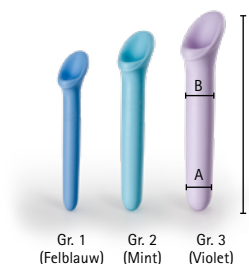


Vagiwell® Pelotten Small

3 pelotten (Dilatatoren) van Siliconen Gr. 1-3

Artikelnummer: Vagiwell S

EAN: 4013273001564

Prijs: 69,-

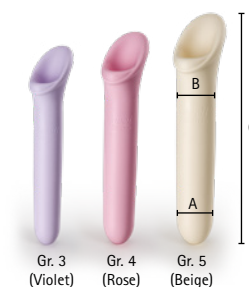


Vagiwell® Pelotten Large

3 pelotten (Dilatatoren) van Siliconen Gr. 3-5

Artikelnummer: Vagiwell L

EAN: 4013273001571

Prijs: 69,-

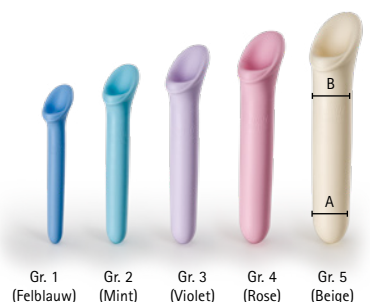

Vagiwell® Pelotten Premium

5 pelotten (Dilatatoren) van Siliconen Gr. 1-5

Artikelnummer: Vagiwell P

EAN: 4013273001557

Prijs: 98,-

Grootte	Kleur	Doorsnede A/B	Lengte C
Gr. 1	Felblauw	12/14 mm	122 mm
Gr. 2	Mint	16/18 mm	135 mm
Gr. 3	Violet	20/22 mm	150 mm
Gr. 4	Rose	24/26 mm	163 mm
Gr. 5	Beige	28/30 mm	177 mm